


GOTTINGER HANDELSHAUS

Produktkatalog Orthopädietechnik

SERVICEFERTIGUNG FÜR ORTHETIK UND PROTHETIK

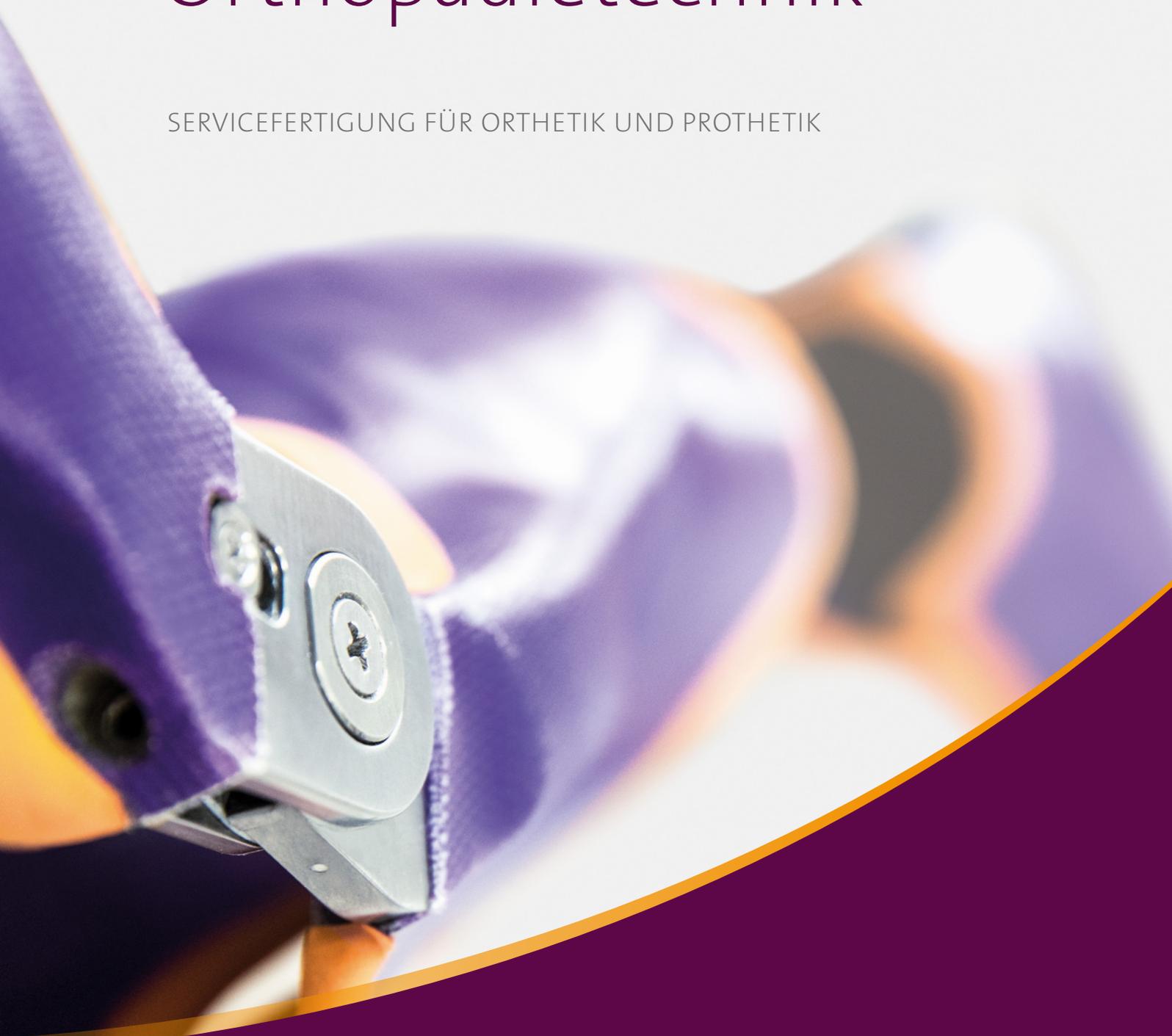

 **GOTTINGER**

Servicefertigung

Die Versorgung Ihrer Patienten in guten Händen



Hochwertige Fremdfertigungen in gewohnter Qualität

Ablauf der Servicefertigung

1. ANFRAGE

Bitte füllen Sie hierfür das Anfrageformular (siehe Seite 38) vollständig aus. Gerne helfen wir Ihnen telefonisch bei der Auswahl der Gelenke.

2. ANGEBOT

Sie erhalten anschließend von uns ein entsprechendes Kostenangebot mit allen weiteren Informationen zur Servicefertigung.

3. MASSABNAHME

Die Maßabnahme und die Erstellung des Abdruckes führen Sie, wie gewohnt, in Ihrer Werkstatt durch.

4. UNTERLAGEN

Bitte senden Sie folgende anonymisierte Unterlagen zusammen mit Ihrem Modell zu uns:

- › Vollständig ausgefülltes Bestellformular
- › Klinische Bilder sowie Video (falls vorhanden)
- › Elastischen Gießharzstoff (falls gewünscht)
- › Skizze des Randverlaufes

Folgende Varianten stehen als Modellzusendung zur Verfügung:

- › Gipsnegativ => wir übernehmen für Sie die Herstellung des Gipspositives. (keine Passformgarantie)

- › Fertig modelliertes Gipspositiv
- › Fertig modellierter CAD-Datensatz
=> Wir fräsen ein Positivmodell und fertigen darauf die Orthese
- › STL-Datensatz eines unmodellierten Modelles
=> Wir übernehmen für Sie die Herstellung eines Modellpositives

Wir empfehlen zur Überprüfung der Passform die Anfertigung einer Probeorthese. Gerne fertigen wir für Sie eine Probeorthese an (gegen Aufpreis).

Hinweis: Bitte verpacken Sie Ihr Modell bruchstabil!

5. HERSTELLUNG

Herstellung der Orthese in unserer Werkstatt.

6. VERSAND

Versand der zur Anprobe fertigen Orthese an Sie.


7. ANPROBE / FERTIGSTELLUNG

Die Anprobe sowie die Fertigstellung der Orthese erfolgt durch Sie. Gerne übernehmen wir, nach Rücksprache und durchgeführter Anprobe, auch die Fertigstellung der Orthese für Sie.

Nutzen Sie unseren Konfigurator!
www.shop.gottinger.de

Stets die bestmögliche Versorgung

Servicefertigung für Sanitätshäuser

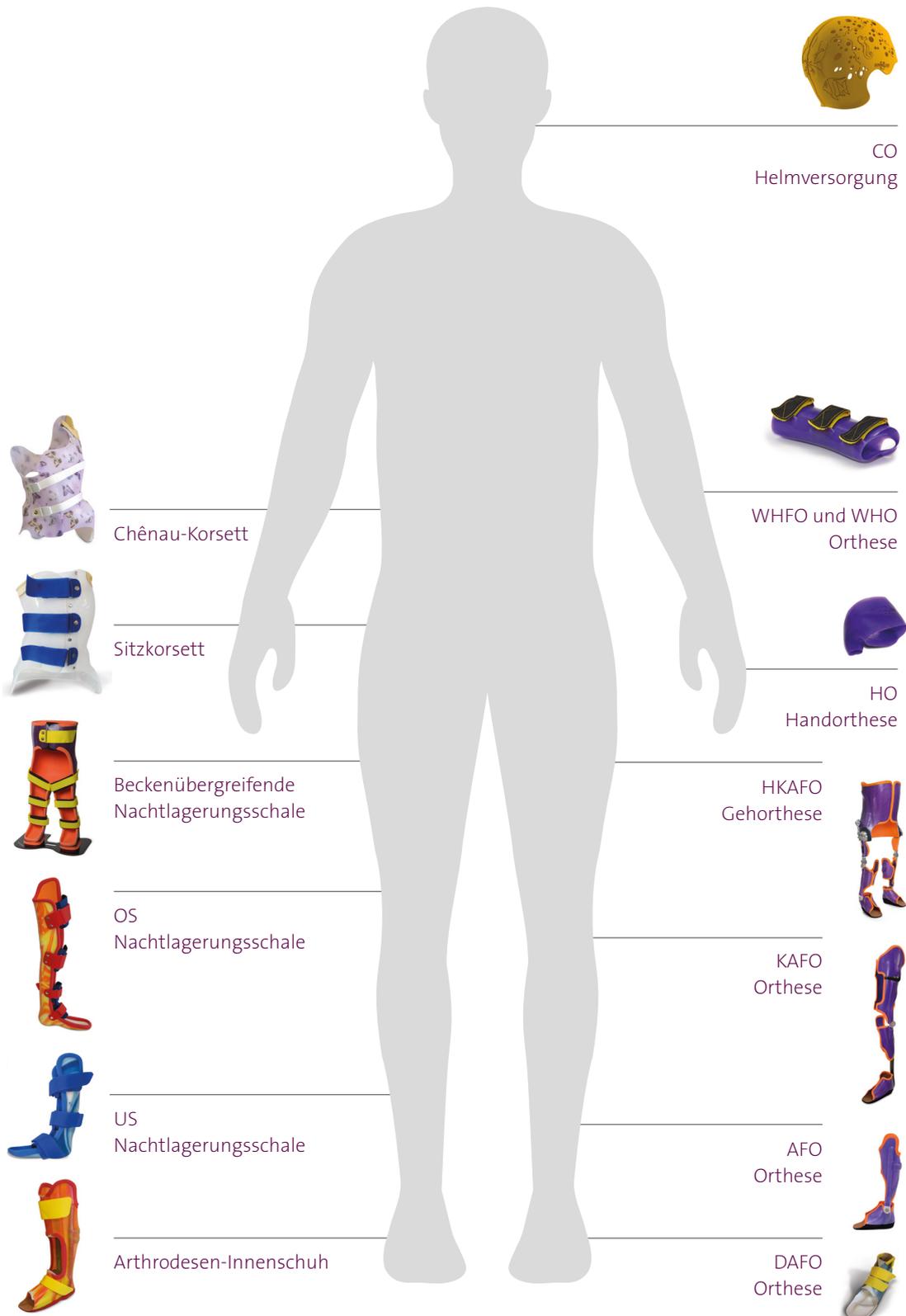

SERVICEFERTIGUNG ORTHETIK		
	FUNKTIONSORTHESEN	LAGERUNGSORTHESEN
CO	Schutz- / Korrekturhelm	
	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff, FVW (Prepreg) oder im 3-D-Druck. Mit entsprechender Polsterung.	
TLSO	Rumpforthese	
	Chênau-Korsett Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff.	Sitzkorsett mit Beinteil oder Verstärkung der Sitzkante. Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff.
WHFO / WHO	Orthese Finger / Hand und Unterarm übergreifend	
	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff oder FVW. Bei Bedarf mit Gelenken.	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff, Silikon oder FVW.
HO	Handorthese	
	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff oder Silikon.	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff oder Silikon.
HKAFO	Orthese vom Fuß bis über die Hüfte reichend	
	Mit 1-, 2- oder 3-D-Hüftgelenk und unilateraler Schienenföhrung. Gefertigt in FVW.	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff (PE) oder aus FVW. Polsterung in 2-Phasen-Schaumtechnik und bei Bedarf mit Gelenken sowie Ausgleich zur Stehfunktion.
KAFO	Orthese vom Fuß bis über das Knie reichend	
	Mit bi- oder unilateraler Schienenföhrung. Gefertigt in FVW.	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff (PE) oder aus FVW. Polsterung in 2-Phasen-Schaumtechnik und bei Bedarf mit Gelenken.
AFO	Orthese vom Fuß bis zum Unterschenkel reichend	
	Mit bi- oder unilateralem Knöchelgelenk. Gefertigt in FVW.	Gefertigt aus thermoplastischem Kunststoff (PE) oder aus FVW. Polsterung in 2-Phasen-Schaumtechnik und bei Bedarf mit Gelenken.
DAFO	Dynamische Knöchel-Fuß-Orthese	
	Gefertigt aus FVW oder thermoplastischem Kunststoff (PP).	

Alle Versorgungsn werden individuell nach Ihren Angaben gefertigt.
Bitte füllen Sie zur Erstellung eines Kostenangebotes das „Anfrageformular Servicefertigung“ (Seite 38) vollständig aus.
Weitere Informationen zur Ausführung der einzelnen Produkte finden Sie auch unter: www.shop.gottimger.de/servicefertigung

Gottinger ist für die Fertigung des M.A.S. Schaftes bekannt

SERVICEFERTIGUNG – PROTHETIK	
DEFINITIVSCHAFT	
	Produktion des Definitivschafte nach Ihren Wünschen. Bitte senden Sie uns dazu einen gut sitzenden Testschaft bzw. das entsprechende Modell zu.
HTV-SILIKON-SCHAFT	
	Anfertigung eines HTV-Silikon-Schafte. Die Ausführung erfolgt nach Wunsch mit individuellen Gelpolstern oder auch einer Anti-Haft-Beschichtung. Bitte senden Sie uns dazu einen gut sitzenden Probeschafte bzw. ein präzise angefertigtes Gipspositiv zu.
TESTSCHAFT	
	Anfertigung eines Testschafte für Ober- und Unterschenkel. Bitte senden Sie uns dazu ein fertig modelliertes Modell bzw. einen STL-Datensatz zu.
UKB-PROTHESE	
	UKB-Prothese, individuell angefertigt im 3-D-Druck. Dazu benötigen wir eine gutsitzende (abgeschlossene Testphase) Testversorgung bzw. Definitivversorgung. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf, um alles weitere zu besprechen.
PROTHESEN-COVER	
	Prothesen-Cover, individuell angefertigt im 3-D-Druck. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf, um alles weitere zu besprechen.


Alle Versorgungen werden individuell nach Ihren Angaben gefertigt. Bitte nehmen Sie zur Absprache aller Einzelheiten im Vorfeld Kontakt mit uns auf. Im Anschluss senden wir Ihnen ein individuelles Kostenangebot zu.



Der Name Gottinger steht für Passgenauigkeit und Qualität – das gilt auch bei Fremdfertigungen.

Fräsmodele aus Meisterhand

SERVICEFERTIGUNG – CAD	
AFO	CO
	
KAFO	TF
	
HKAFO	TT
	
TLSO	EWHFO
	
	WHFO / WHO
	

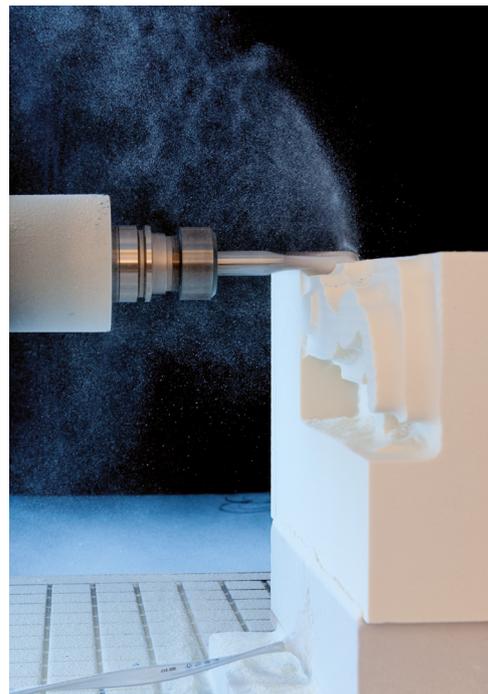

Gottinger FräsmodeLL aus Hart- oder Weichschaum

Orthetik

Wir fräsen für Sie die Modelle aus Hart- und Weichschaum für die untere sowie obere Extremität. Bitte senden Sie uns dazu den fertig modellierten Fräsdatensatz (STL etc.) zu. Gerne spiegeln wir den Datensatz für Sie.

Prothetik

Wir fräsen sämtliche Schaftmodelle aus Hart- und Weichschaum für Sie. Bitte senden Sie uns dazu entweder den fertig modellierten Fräsdatensatz (STL etc.) zu oder für ein M.A.S. Schaftmodell das vollständig ausgefüllte Bestellformular.

Wir beraten Sie gerne!

Der direkte Weg zur idealen Versorgung

Gottinger Handelshaus OHG

Ilchinger Weg 1
85604 Zorneding
Tel.: +49 (0) 81 06 - 36 63 - 36
Fax: +49 (0) 81 06 - 36 63 - 31
E-Mail: handelshaus@gottinger.de

Gottinger Online-Shop

Besuchen Sie unseren
Online-Shop:
www.shop.gottinger.de



... Orthopädietechnik, die Menschen bewegt.
www.gottinger.de
www.shop.gottinger.de